

MEDLANCE®

Confort y Seguridad **plus**

NOVEDAD



Un mejor control de la técnica de punción. Nueva lanceta de seguridad Medlance® plus

- **Suave** – la lanceta Medlance® plus está dotada de una aguja extremadamente afilada que al penetrar en la piel adopta una posición óptima. Su movimiento lineal elimina las vibraciones disminuyendo el dolor y evitando daños en los tejidos. El disparador del dispositivo de punción Medlance® plus actúa con suavidad en el área de punción lo que incrementa el confort del paciente.
- **Fácil de usar** – Medlance® plus es una lanceta moderna, ergonómica y segura. Su infalible mecanismo se activa al entrar en contacto con la piel sin necesidad de ser cargado previamente, gracias a lo cual la toma de sangre es más fácil que nunca.
- **Eficiente** – la lanceta de seguridad Medlance® plus, diseñada como un dispositivo "independiente de la técnica", asegura la obtención de un volumen de sangre adecuado con el mínimo dolor posible para el paciente. Medlance® plus garantiza la toma de sangre con un sólo pinchazo.
- **Segura** – la lanceta de seguridad Medlance® plus es un dispositivo desechable y autodestructible que no puede ser recargado. La aguja Medlance® plus está debidamente protegida antes y después de su uso, lo cual previene lesiones accidentales. A fin de asegurar la máxima seguridad, las lancetas Medlance® plus son esterilizadas mediante irradiación con rayos gamma de 25 KGy.

La toma de sangre que con un sólo pinchazo garantiza un adecuado volumen de sangre...

La solución única que proporciona la activación del dispositivo Medlance® plus permite guardar la debida distancia entre el dispositivo y el dedo en el momento de realizar la punción. Además, como la presión en el área de punción viene preestablecida se asegura al mismo tiempo el mejor control de la profundidad de penetración y la obtención del volumen adecuado de la muestra de sangre. La lanceta aumenta los niveles de seguridad al ser "independiente de la técnica", además de no requiere formación especializada por parte del usuario.



*Cuidamos de su seguridad
Cuidamos del confort del paciente*

La lanceta de seguridad desechable Medlance® plus es un moderno dispositivo diseñado para proporcionar un nuevo confort al muestreo de sangre capilar. Medlance® plus forma parte integral de los programas de prevención de lesiones accidentales en hospitales, laboratorios clínicos, consultorios médicos y otros lugares donde los pacientes y profesionales sanitarios deberían sentirse seguros.

La utilización de lancetas de seguridad Medlance® plus es la mejor manera de eliminar lesiones por pinchazos e infecciones cruzadas.

NOVEDAD




MEDLANCE®

Confort y Seguridad PLUS

Instrucciones de uso

El dispositivo Medlance® plus es fácil de usar por lo que la toma de pequeñas cantidades de sangre resulta cómoda tanto para los pacientes como para el personal médico. Rogamos sigan las instrucciones de uso que se especifican a continuación y observen los procedimientos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias locales en materia de aprovechamiento de residuos.

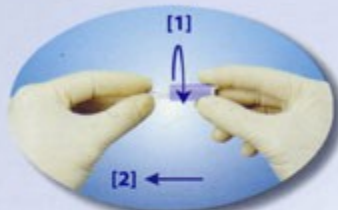

Desroscar el capuchón de color lila (azul, verde o amarillo) y luego tirar hacia fuera en línea recta.



Apretar fuertemente el dispositivo Medlance® plus sobre el sitio donde se tiene que realizar la punción para activar la lanceta.



Seguir apretando de manera suave y discontinua la zona circundante al pinchazo para obtener el volumen de sangre adecuado.

Datos técnicos y modalidades de pedido

Las lancetas de seguridad Medlance® plus están disponibles en cuatro versiones distintas identificadas por un código de colores para satisfacer los requisitos relativos al volumen de la muestra de sangre en función del tipo de piel.

Las lancetas de seguridad Medlance® plus se suministran en prácticas cajas de 200 unidades con tapa de fácil apertura.



PRODUCTO	DIÁMETRO DE AGUJA/LANCETA	PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN	NR CAT.	RECOMENDACIONES PARA USUARIOS	VOLUMEN DE SANGRE OBTENIDA*
Medlance® plus Lite	Aguja 25G	1.5 mm	7043	Tomar muestras de sangre nunca había resultado tan poco doloroso! Medlance® plus Lite es ideal para monitorizar el nivel de glucosa en la sangre.	
Medlance® plus Universal	Aguja 21G	1.8 mm	7044	Para cuando se necesita un mayor volumen de sangre, como por ejemplo para examinar el nivel de glucosa, hemoglobina, colesterol, parámetros de coagulación y gasometría.	
Medlance® plus Extra	Aguja 21G	2.4 mm	7045	La piel del paciente es dura? Necesita más cantidad de sangre? Haga uso de Medlance® plus Extra y extraiga más de 10 µl. También para hombres y trabajadores sometidos a esfuerzo físicos.	
Medlance® plus Special	Lanceta de 0.8 mm	2.0 mm	7046	Medlance® plus Special es ideal para realizar punciones de talón en recién nacidos y yemas de los dedos en adultos. Una lanceta muy afilada que asegura la obtención de un adecuado volumen de sangre y una rápida cicatrización.	

* El tamaño de la gota de sangre en el dibujo refleja las diferencias en el supuesto volumen de la muestra de sangre obtenida mediante distintas variedades del dispositivo Medlance® plus y no corresponde al volumen real de la muestra.

Para obtener más información o hacer un pedido, por favor contacte con:

HTL STREFA
high tech lab



HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy, Ste 300
Marietta, GA 30066, USA
T: +1 770-528-0410; F: +1 770-528-0411
info@htl-strefa.com ; www.htl-strefa.com

HTL-STREFA S. A.
Adamówek 7, 95-035 Ozorkow, Polonia
T: +48 22 811 0536 • F: +48 22 811 5047
www.htl-strefa.pl • info@htl-strefa.pl